FLUENT™ VÄTSKEHANTERINGSSYSTEM

Användarreferens

Förflyttning och placering



Använd handtaget på konsolens baksida för att placera systemet inför proceduren.



Tryck ner hjulens låsspakar för att låsa konsolen på plats.




Plugga in strömkabeln på baksidan av konsolen.



Slå PÅ (I) systemet.


Processinställningar

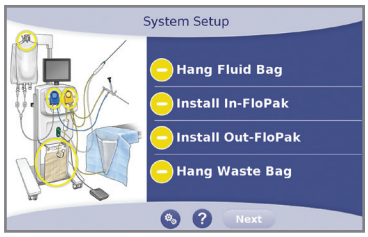

Följ uppmaningarna på inställningsskärmen ovan. Tryck på ? för att visa hjälpavsnittet.




Häng upp tillförselpåsen/-påsarna.

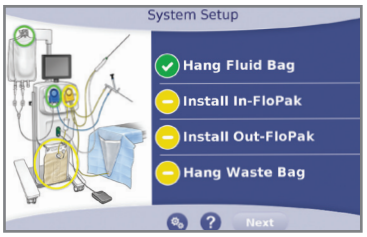

Bekräftat ✓ visas intill ”Hang Fluid Bag” på skärmen.



Dra av sterilskyddet och överlämna den öppnade satsen till sterilsköterskan. Placera procedursatsen i ett sterilt fält.

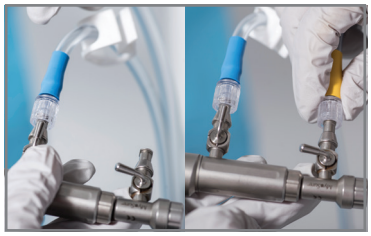

Anslut hysteroskopets gula utflödeskoppling till hysteroskopets utflöde och den blå inflödeskopplingen till hysteroskopets inflöde.



Anslut återstående In-FloPak, Out-FloPak och slang till icke-steril cirkulator.



Sätt in blå In-FloPak som bilden visar. Bekräftelse ✓ visas intill ”Install In-FloPak” på skärmen.



Sätt en klämma på slangen och spetsa inflödets tillförselpåse.



Sätt in gul Out-FloPak som bilden visar. Bekräftelse ✓visas intill ”Install Out-FloPak” på skärmen.



Anslut utflödesslangen under skinkorna (UB) (med gul koppling) till UB-draperingen.




Häng upp avfallspåsen på hängaren. Bekräftelse ✓visas intill ”Hang Waste Bag” på skärmen.




Anslut (tryck på) avfallspåsens utflödesslang till avfallspåsen.




Kontrollera att alla slangar sitter på plats, att inflödeskanalen är öppen och att utflödeskanalen är stängd. Tryck på ”Next” för att fortsätta.

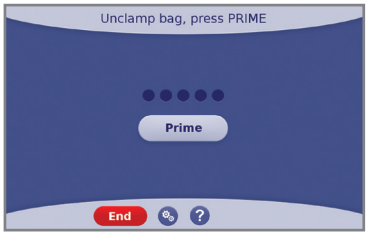

Koppla bort slangen från vätskepåsen. Tryck på ”Prime” när du är klar. Rikta hysteroskopet in i duken under skinkorna (UB) i patienthöjd.

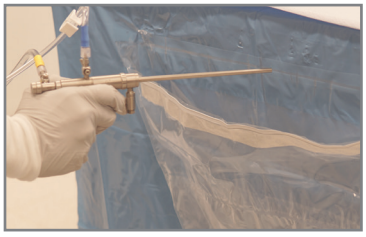

När systemet fylls rinner vätska genom FloPak:ar och alla slangar. Kontrollera att vätskan rinner av duken under skinkorna.

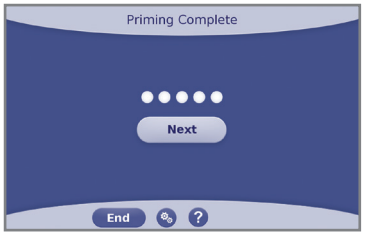

Tryck på ”Next” när fyllningen är klar.

FLUENT™ VÄTSKEHANTERINGSSYSTEM

Användarreferens

Användning av systemet



Börja genom att trycka på ”Run”. Om primningen inte utfördes i duken under skinkorna, måste systemet nollställas efter att primningscykeln avslutats för att undvika ett falskt värde för vätskeunderskott.



För att justera inställningen för vätskebristgräns kan du trycka på knappen ”Change”, välja den förinställda vätskebristgränsen eller använda tangenterna ▲▼. Tryck på ✓.



För att justera tryckinställningen trycker du på tryckcirkelns ”Change”-knapp och därefter används tangenterna ▲▼ för att ställa in trycket. Tryck på ✓. Tryck på ”Run” för att starta hysteroskopin.




Om MyoSure®-enheten för vävnadsborttagning används ska enheten och fotpedalen anslutas till uttagen på den gröna delen på systemets framsida. Anslut den gröna kopplingen till det gröna uttaget på gul Out-FloPak.



Om systemet visar ”Supply bag low warning” ska en ny vätskepåse anslutas.



Du kan hänga upp en ny vätskepåse när som helst, även när systemet är i drift.

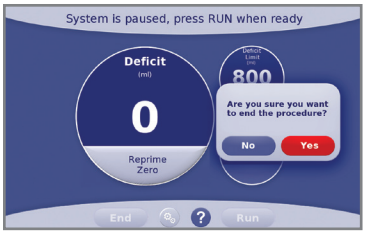


Tryck på ”End” när proceduren är klar. Avsluta proceduren genom att trycka på ”Yes” för att bekräfta.



När all avfallsvätska samlats upp och all överbliven vätska tagits om hand trycker du på ”Done”.

Rengöring och kassering

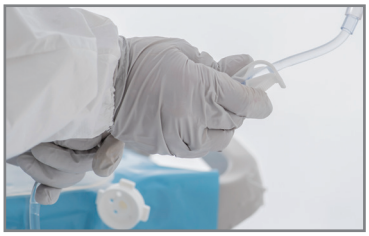

Stäng klämman på inflödesslangen till vätskepåsen.



Koppla bort slangseten från hysteroskopet.




Lossa utflödesslangens lock från avfallspåsen.



Avlägsna vävnadsfällan från hållaren för att komma åt den resekerade vävnaden.



Skruva på locket och avlägsna avfallspåsen.

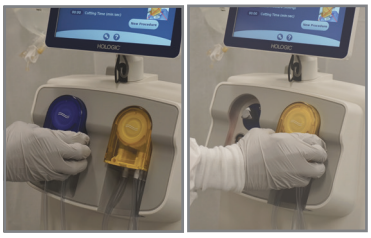

Avlägsna blå In-FloPak och gul out Flo-Pak. Kassera FloPak-enheterna och avfallspåsen.



Stäng av systemet och dra ut nätsladden ur vägguttaget.

HOLOGIC®

www.hologic.com | 800-442-9892

© 2018 Hologic, Inc.

Hologic, Fluent och MyoSure är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Denna användarreferens ska användas tillsammans med, men inte ersätta, Fluent Fluid Management Systems bruksanvisning. Innan denna procedur genomförs måste läkaren granska och vara bekant med de fullständiga användningsanvisningarna för Fluent-konsolen och engångsenheterna, såväl som varningar, kontraindikationer och säkerhetsinformation.

AW-14392-1601 Rev 002
11/2018