FLUENT™ VÆSKEBEHANDLINGSSYSTEM

Brukerreferanseveiledning

Bevegelse og posisjonering



Bruk håndtaket på baksiden av konsollen til å posisjonere systemet for prosedyren.



Trykk på hjullåsespakene for å låse konsollen på plass.




Sett i strømledningen på baksiden av konsollen.



Slå PÅ systemet (I).


Oppsett av prosedyre

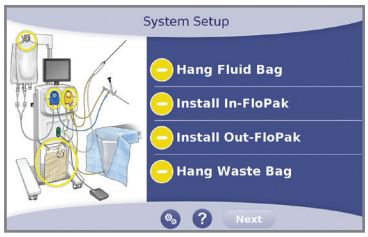

Følg kommandoene på oppsettskjermbildene over. For å vise hjelp trykker du på ?.




Heng opp forsyningsposen(e).

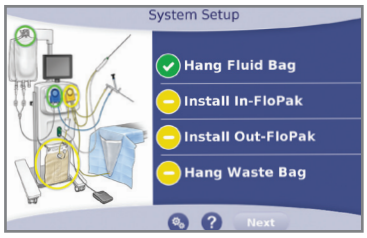

Sjekk ✓-displayene ved siden av "Heng opp væskeposen" på skjermbildet.



Trekk av den sterile forseglingen og gi det åpne settet til den sterile operasjonssykepleieren. Legg prosedyresettet i et sterilt felt.

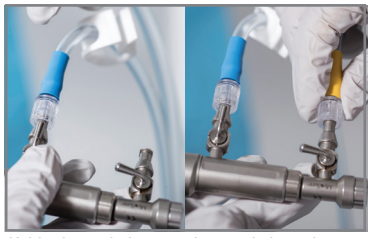

Koble den gule hysteroskoputtakskontakten til uttaket på hysteroskopet og den blå skopinntakskontakten til inntaket på hysteroskopet.



Før gjenværende In-FloPak, Out-FloPak og slanger til ikke-steril sirkulasjonspumpe.



Sett inn den blå In-FloPak som vist. Sjekk ✓-displayer ved siden av "Installer In-FloPak" på skjermen.



Klem av slange og sett spike i inntaksforsyningsposen.



Sett inn den gule Out-FloPak, som vist. Sjekk ✓-displayer ved siden av "Installer Out-FloPak" på skjermen.



Koble til under baken (UB)-uttaksslange (med gul kontakt) til UB-draperingen.




Heng avfallsposen på hengeren. Sjekk ✓-displayer ved siden av "Heng opp avfallsposen" på skjermbildet.




Koble til (trykk på) avfallsposeuttaksslangen til avfallsposen.




Sjekk at alle slanger er riktig tilkoblet, at inntakskanalen er åpen og at uttakskanalen er lukket. Trykk på "Neste" for å fortsette.

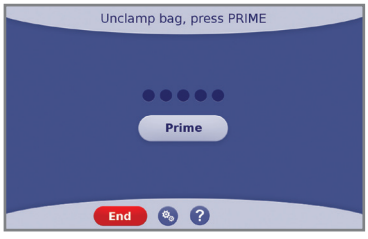

Løsne klemmen på slangen fra væskeposen. Trykk på "Prime" når det er klart. Rett hysteroskopet inn i draperingen under baken (UB) i pasienthøyde.

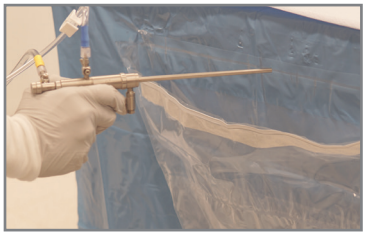

Når systemet primes, renner væsken gjennom FloPaks og alle slangene. Sørg for at væsken dreneres i draperingen under baken.

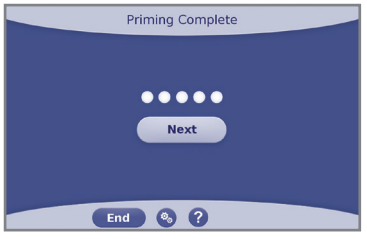

Trykk på "Neste" når priming er fullført.

FLUENT™ VÆSKEBEHANDLINGSSYSTEM

Brukerreferanseveiledning

Bruke systemet



Trykk på "Kjør" for å starte. Hvis primingen ikke ble fullført til draperingen under baken, må væskeunderskuddet nulles ut etter at primingssyklusen er fullført, da det ellers kan føre til falskt underskudd.



Hvis du vil justere innstillingen for underskuddsgrensen, trykk på knappen "Endre" for underskuddsgrense, og velg deretter de forhåndsinnstilte underskuddsgrensene eller bruk tastene ▲▼. Trykk på ✓.



Hvis du vil justere trykkinnstillingene, trykk på "Endre"-knappen i trykkringen bruk deretter tastene ▲▼ til å stille inn trykket. Trykk på ✓. Trykk på "Kjør" for å starte hysteroskopi.




Hvis du bruker MyoSure® vevfjerningsenhet, kobler du enheten og fotpedalen til kontaktene på den grønne platen foran på systemet. Koble den grønne kontakten til den grønne kontakten på den gule Out-FloPak.



Hvis systemet viser en "Advarsel om lavt innhold i forsyningsposen", legger du til en ny væskepose.



Du kan når som helst henge opp en ny væskepose, selv når systemet er i gang.

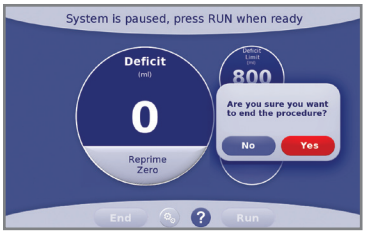


Trykk på Avslutt når prosedyren er utført. For å avslutte prosedyren trykker du på "Ja" for å bekrefte.



Når all avfallsvæske er samlet opp og all overflødig væske er gjenvunnet, trykker du på "Utført".

Opprydding og avhending

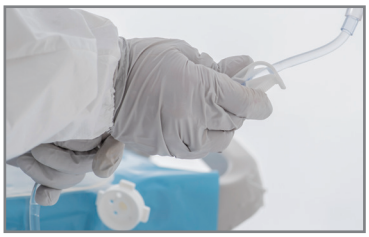

Lukk klemmen på inntaksslangen til væskeposen.



Koble slangesettene fra hysteroskopet.




Koble fra uttaksslangehetten fra avfallsposen.



Fjern vevsfellen fra vevsfelleholderen for å få tilgang til resektert vev.



Skru på hetten og fjern avfallsposen.

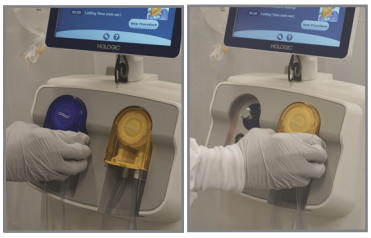

Fjern blå inngangs-FloPak og gul utgangs-FloPak. Kast FloPaks og avfallsposen.



Slå av systemet og trekk ledningen ut fra uttaket.

HOLOGIC®

www.hologic.com | 800-442-9892

© 2018 Hologic, Inc.

Hologic, Fluent og MyoSure er registrerte varemerker som tilhører Hologic, Inc. og/eller dennes datterselskaper i USA og/eller andre land. Denne brukerreferanseveiledningen er designet til å bli brukt i sammenheng med, ikke erstatte, brukerhåndboken for Fluent væskebehandlingssystem. Før prosedyren gjennomføres, må legen gå gjennom og være kjent med alle bruksanvisningene for Fluent-konsollen og engangsenheter, i tillegg til alle advarsler, kontraindikasjoner og sikkerhetsinformasjon.

AW-14392-1801 Rev 002
11/2018