FLUENT™ VÆSKESTYRINGSSYSTEM

Referencevejledning

Bevægelse og placering



Brug håndtaget bag på konsollen til at placere systemet inden proceduren.



Tryk på hjulenes bremsegreb for at fastlåse konsollen i positionen.




Sæt strømstikket i bag på konsollen.



Tænd for systemet (I).


Procedureopsætning

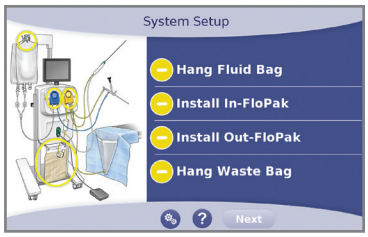

Følg meddelelserne på opsætningsskærm-billederne ovenfor. Tryk på ? for at få hjælp.




Hæng forsyningsposen (-erne) op.

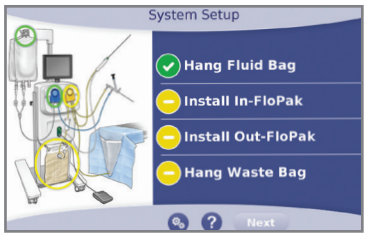

Verificer, at ✓ vises ved siden af 'Hang Fluid Bag' (Hæng væskepose) på skærmen.



Træk den sterile forsegling af, og giv det åbne kit til den sterile operationssygeplejerske. Placer proceduresættet i det sterile felt.

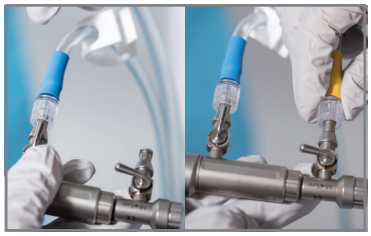

Forbind hysteroskopets gule udløbskonnektor til hysteroskopets udløb, og den blå indløbskonnektor til hysteroskopets indløb.



Giv de resterende In-FloPak, Out-FloPak og slanger til den usterile sygeplejerske.



Sæt den blå In-FloPak i som vist. Verificer, at ✓ vises ved siden af 'Install In-FloPak' (Indsæt In-FloPak) på skærmen.



Afklem slangen, og sæt studsen i indløbsforsyningsposen.



Sæt den gule Out-FloPak i som vist. Verificer, at ✓ vises ved siden af 'Install Out-FloPak' (Indsæt Out-FloPak) på skærmen.



Forbind UB-udløbsslangen (UB: under ballerne) (med gul konnektor) til UB-afdækningsstykket.




Hæng affaldsposen på bøjlen. Verificer, at ✓ vises ved siden af 'Hang Waste Bag' (Hæng affaldspose) på skærmen.




Forbind (tryk på) affaldsposens udløbsslange med affaldsposen.




Kontrollér, at alle slanger er korrekt tilsluttet, indløbskanalen er åben og udløbskanalen er lukket. Tryk på 'Next' (Næste) for at fortsætte.

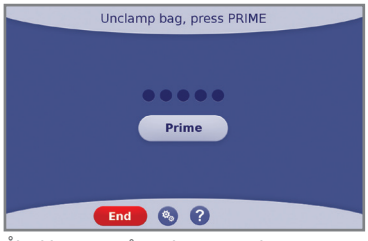

Åbn klemmen på væskeposens slange. Tryk på "Prime" (Prim), når du er klar. Ret hysteroskopet ind på afdækningsstykket til under ballerne (UB) i patientens højde.

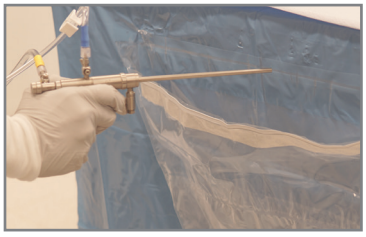

Når systemet primer, løber der væske gennem FloPaks og alle slanger. Sørg for, at væsken drænes i afdækningsstykket til under ballerne.

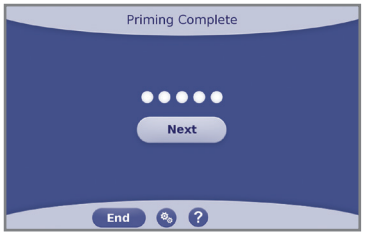

Tryk på 'Next' (Næste), når primingen er fuldført.

FLUENT™ VÆSKESTYRINGSSYSTEM

Referencevejledning

Brug af systemet



Tryk på 'Run' (Kør) for at begynde. Hvis klargøringen blev foretaget ind i afdækningsstykket til under ballerne, skal væskeunderskuddet nulstilles efter klargøringscyklussen, da der ellers kan opstå et falsk underskud.



Tryk på ændringsknappen for underskudsgrænser for at ændre indstillingerne for underskudsgrænse, og vælg derefter de forudindstillede underskudsgrænser eller brug tasterne ▲▼. Tryk på ✓.



Tryk på trykcirklens ændringsknap for at ændre trykindstillingen, og brug derefter tasterne ▲▼ til at indstille trykket. Tryk på ✓. Tryk på 'Run' (Kør) for at starte hysteroskopet.




Hvis MyoSure® vævsfjernelsesanordningen anvendes, skal anordning og fodpedal sættes i konnektorerne på den grønne plade foran på systemet. Forbind den grønne konnektor med den grønne konnektor på den gule Out-FloPak.



Tilføj endnu en væskepose, hvis systemet viser advarslen 'Supply bag low' (Forsyningspose lav).



Der kan til enhver tid hænges en ny væskepose på, også mens systemet kører.

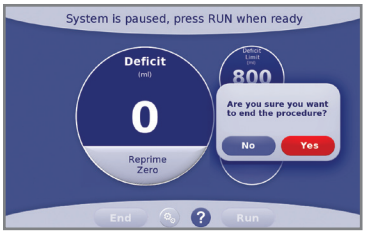


Tryk på End (Afslut), når proceduren er fuldført. For at afslutte proceduren skal der trykkes på 'Yes' (Ja) for at bekræfte.



Tryk på 'Done' (Udført), når al affaldsvæske er blevet indsamlet og al overskydende væske er blevet opsamlet.

Rengøring og bortskaffelse

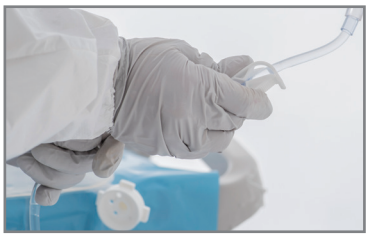

Luk klemmen på indløbsslangen til væskeposen.



Kobl slangesættene fra hysteroskopet.




Kobl udløbsslangens hætte fra affaldsposen.



Fjern vævsfælden fra vævsfældeholderen for at få adgang til resekteret væv.



Skru hætten på, og fjern affaldsposen.

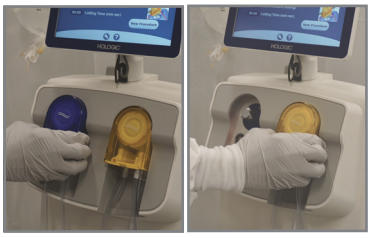

Fjern den blå in-FloPak og den gule out-Flo-Pak. Bortskaf FloPaks og affaldsposen.



Sluk for systemet, og tag stikket ud af stikkontakten.

HOLOGIC®

www.hologic.com | 800-442-9892

© 2018 Hologic, Inc.

Hologic, Fluent og MyoSure er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Denne referencevejledning er beregnet til brug sammen med – ikke som en erstatning for – brugervejledningen til Fluent-væskestyringsystemet. Inden proceduren udføres, skal lægen gennemgå og gøre sig bekendt med den fulde betjeningsanvisning til Fluent-konsollen og engangsanordningerne samt alle advarsler, kontraindikationer og sikkerhedsoplysninger.

AW-14392-1901 Rev 002
11/2018