FLUENT™ NESTEENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Käyttäjän käsikirja

Siirtäminen ja sijoitus



Käytä konsolin takana olevaa kahvaa sijoittamaan järjestelmä toimenpidettä varten.



Lukitse konsoli paikalleen painamalla pyörälukkovipuja.




Kytke virtajohto konsolin takaosaan.



Käynnistä järjestelmä (I).


Toimenpiteen valmisteleminen

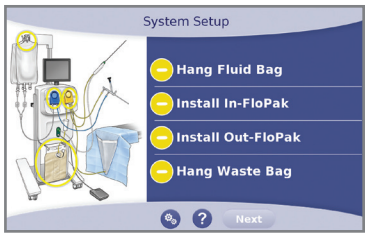

Noudata yllä olevien asetusnäyttöjen kehotteita. Ohje esitetään koskettamalla ⓘ.




Ripusta syöttöpussi(t).

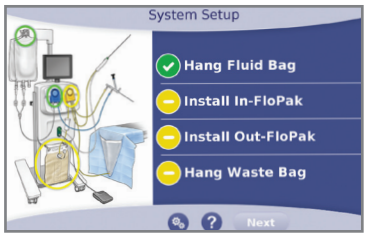

Varmista, että ✓ näkyy kohdan ”Hang Fluid Bag” vieressä näytöllä.



Vedä taakse steriili sulku ja anna avoin pakkaus steriilille instrumenttihoitajalle. Aseta toimenpidepakkaus steriiliin kenttään.

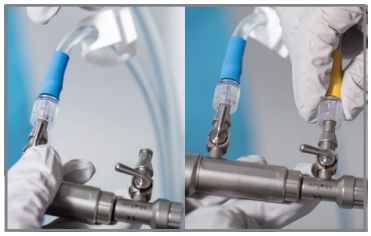

Kytke keltainen hysteroskoopin ulosvirtausliitin hysteroskoopin ulosvirtaukseen ja hysteroskoopin sininen sisäänvirtausliitin hysteroskoopin sisäänvirtaukseen.



Vie jäljelle jäävä In-FloPak, Out-FloPak ja letkusto ei-steriiliin sirkulaattoriin.



Aseta sininen In-FloPak kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että ✓ näkyy kohdan ”Install In-FloPak” vieressä näytöllä.



Sulje letkusto ja lävistä sisäänvirtauksen syöttöpussi.



Aseta keltainen Out-FloPak kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että ✓ näkyy kohdan ”Install Out-FloPak” vieressä näytöllä.



Kytke pakaranalusen (UB) ulosvirtausletkusto (keltaisella liittimellä) UB-liinaan.




Ripusta jätepussi koukkuun. Varmista, että ✓ näkyy kohdan ”Hang Waste Bag” vieressä näytöllä.




Kytke (paina päälle) jätepussin ulosvirtausletkusto jätepussiin.




Varmista, että kaikki letkut on kytketty oikein, sisäänvirtauskanava on auki ja ulosvirtauskanava on kiinni. Jatka koskettamalla ”Next”.

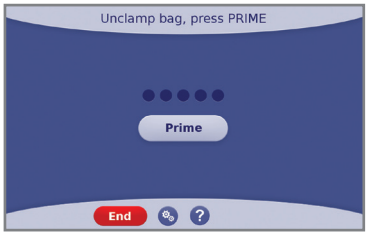

Irrota nestepussin letkuston puristin. Kun olet valmis, kosketa ”Prime”. Suuntaa hysteroskooppi pakaranalusliinaan (UB) potilaan korkeudella.

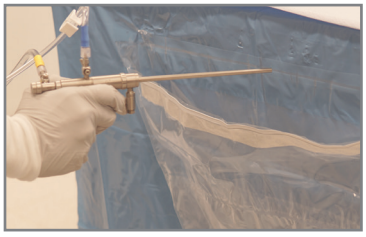

Kun järjestelmä tekee esitäyttöä, nestettä virtaa FloPakien ja kaikkien letkujen läpi. Varmista, että neste valuu pakaranalusliinaan.

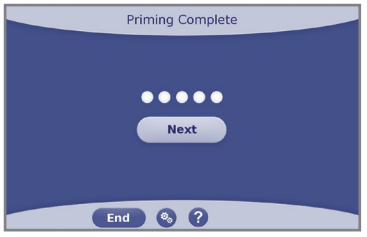


Kun esitäyttö on valmis, kosketa ”Next”.

FLUENT™ NESTEENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Käyttäjän käsikirja

Järjestelmän käyttäminen

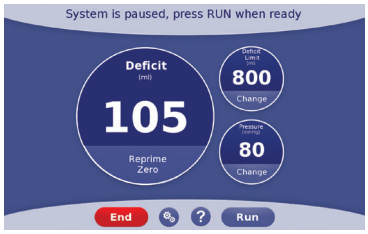

Aloita koskettamalla ”Run”. Jos alustamista ei ole tehty pakaranalusliinaan, nestehukka-arvo täytyy nollata alustuksen valmistumisen jälkeen, ettei seurauksena ole virheellinen hukka-arvo.



Alijäämäasetuksen rajaa säädetään painamalla alijäämärajan ”Change”-painiketta ja valitsemalla sitten esiasetetut alijäämärajat tai käyttämällä ▲▼-näppäimiä. Kosketa ✓.



Paineasetusta säädetään koskettamalla painesyklin ”Change”-painiketta ja käyttämällä sitten näppäimiä ▲▼ paineen asettamiseksi. Kosketa ✓. Hysteroskopia käynnistetään koskettamalla ”Käynnistä”.




Jos käytössä on MyoSure®-kudoksenpoistolaite, kytke laite ja poljinkytkin liittimiin, jotka ovat järjestelmän etupuolen vihreässä levyssä. Kytke vihreä liitin vihreään liittimeen keltaisessa Out-FloPakissa.



Jos järjestelmä näyttää varoituksen ”Supply bag low”, lisää toinen nestepussi.



Uuden nestepussin voi ripustaa koska tahansa, jopa silloin, kun järjestelmä on toiminnassa.

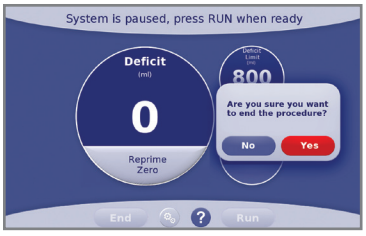


Kun toimenpide on valmis, kosketa End. Vahvista toimenpiteen päättyminen koskettamalla ”Yes”.



Kun kaikki jäteneste on kerätty ja kaikki ylimääräinen neste on korjattu pois, kosketa ”Done”.

Puhdistus ja hävittäminen

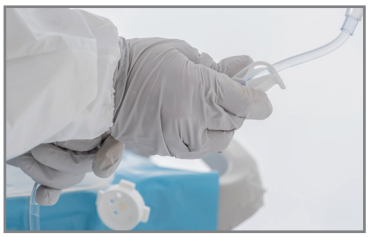

Sulje nestepussiin kulkevan sisäänvirtausletkun puristin.



Irrota letkut hysteroskoopista.




Irrota ulosvirtausletkun korkki jätepussista.



Irrota kudoskeräin pidikkeestään resektoidun kudoksen talteen ottamiseksi.



Sulje korkki ja irrota jätepussi.

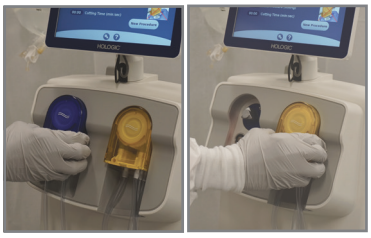

Poista sininen In-FloPak ja keltainen Out-FloPak. Hävitä FloPak-sarjat ja jätepussi.



Sammuta laite ja vedä virtajohto pistorasiasta.

HOLOGIC®

www.hologic.com | 800-442-9892

© 2018 Hologic, Inc.

Hologic, Fluent ja MyoSure ovat Hologic, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkeja tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämä käyttäjän käsikirja on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Nesteenhallintajärjestelmän käyttöoppaan kanssa, ei korvaamaan sitä. Ennen toimenpiteen suorittamista lääkärin on luettava ja tunnettava Fluent-konsolin ja kertakäyttölaitteiden täydet käyttöohjeet, sekä kaikki varoitukset, vasta-aiheet ja turvallisuustiedot.

AW-14392-1701 Rev 002
11/2018