HOLOGIC®
The Science of Sure

HURTIG REFERENCEVEJLEDNING

Sådan foregår indgrebet med NovaSure®

Denne hurtige referencevejledning er lavet til at blive brugt sammen med, men ikke erstatte, NovaSure® brugsanvisning og betjeningsmanual til controlleren. Inden udførelse af indgrebet skal lægen gennemlæse og være fuldt fortrolig med alle driftsinstruktionerne til RF-controlleren og engangsinstrumentet, samt fortrolig med alle advarsler, kontraindikationer og forsigtighedsregler.


Krævede systemkomponenter:

A. En steril NovaSure engangsanordning til brug på én patient
B. NovaSure RF-controller
C. NovaSure fodkontakt
D. NovaSure strømkabel
E. En NovaSure usteril enhed med tørremiddel til udsugningsslangen
F. En NovaSure2 CO_2 beholder



Forberedelser af NovaSure RF-controller:

1. Placer controlleren på et lille, stabilt bord på den ene side af patienten inden for lægens synsvidde.
2. Tilslut lysnetledningen til controlleren og sæt ledningen i en stikkontakt.
3. Skru CO_2 beholderen på regulatoren på bagsiden af panelet på controlleren, indtil den sidder stramt.
4. Tryk vippekontakten på panelet på bagsiden af controlleren til positionen "TÆNDT'.
5. Tilslut fodkontakten til den passende port på controllerens frontpanel.

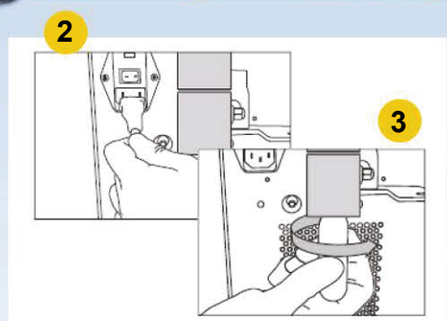





NovaSure®
Endometrial Ablation

Trin i NovaSure® indgrebet

Til personalet

Trin 1: Efter lægen har målt kavitetens længde og fastslået, at længden er ≥ 4 cm, åbnes emballagen med den sterile NovaSure engangsanordning.

Trin 2: Læg engangsanordningen med tilslutningsledningen på det sterile område, mens det usterile tørremiddel til udsugningsslangen holdes væk fra det sterile område.

Trin 3: Åbn den usterile pose med tørremiddel til sugeslangen. Fjern de røde hætter. (Hvis tørremidlet er lyserødt, skal det udskiftes, inden påbegyndelsen af ablationen).

Trin 4: Tilslut tørremidlet med modhagerne på udsugningsslangen på engangsanordningen. Sørg for at sætte modhagerne på tørremidlet helt ind i slangen.


Filter med tørremiddel

Trin 5: Tilslut engangsanordningens ledning til den tilsvarende port på forsiden af controlleren.

Trin 6: Indtast den målte værdi for kavitetens længde, som dikteret af lægen, i NovaSure RF-controllerens længdedisplay ved at trykke på OP/NED pilene.

Trin 7: Indtast bredden af kaviteten indikeret på WIDTH-måleren, som dikteret af lægen, i NovaSure RF-controllerens breddedisplay ved at trykke på OP/NED pilene.

Trin 8: Tryk på knappen ENABLE på controlleren, så snart lægen har trådt på fodkontakten, og kavitetsintegritetsvurderingen er færdig.

Trin 9: Sluk for NovaSure controlleren, så snart indgrebet er gennemført, og lægen har fjernet engangsanordningen fra patienten.

Til lægen

Trin 1: Indfør et spekulum i vagina og grib fat i livmoderhalsen med et tenaculum

Trin 2: Hold livmoderen og udfør uterine sondemåling. Træk længden af cervix fra den uterine sondemåling for at få kavitetens længde. Sørg for at sikre, at kavitetens længde er ≥ 4 cm.

Trin 3: Når personalet tilslutter engangsanordningen til controlleren, klem håndtagene på engangsanordningen, indtil de låser for at sikre controllerens ARRAY POSITION LED slukker og WIDTH-måleren viser ≥ 2,5 cm. Når dette er sikret, tryk på låseudløserknappen og adskil anordningens håndtag for at trække arrayet tilbage.


Låseudløserknap

Trin 4: Juster og lås indstillingsfunktionen til kavitetslængde på engangsanordningen til den målte værdi for kavitetslængden. Personalet vil indtaste længdeværdien i controlleren.


Indstilling af kavitetslængde

Trin 5: Bekræft, at livmoderhalsen er dilateret til 6,0 mm.

Trin 6: Mens der opretholdes et let træk i tenaculummet, holdes fast i den forreste blå del af håndtaget på engangsanordningen for at indsætte instrumentet parallelt med livmoderens akse, indtil den distale del når fundus.

Trin 7: Træk engangsanordningen cirka 0,5 cm tilbage fra fundus. Klem langsomt håndtagene sammen op til punktet, hvor der mærkes øget modstand (LÅS IKKE). Breddemåleren WIDTH skal vise cirka 0,5 cm.

Trin 8: Klem langsomt engangsanordningens håndtag sammen, mens instrumentet forsigtigt bevæges cirka 0,5 cm til og fra fundus, og drej håndtaget på engangsanordningen 45° med og mod uret fra det vertikale plan, indtil håndtagene låser.

Trin 9: Bevæg, når engangsanordningen er låst, anordningen med anteriore, posteriore og laterale bevægelser. Afslut anbringelsen ved at trække engangsanordningen en smule tilbage, indtil breddemåleren WIDTH reduceres med cirka 0,2-0,5 cm.

Trin 10: Hold tenaculummet, og før engangsanordningen langsomt og forsigtigt frem til fundus. Breddemåleren WIDTH skal vise mere end eller det samme som ved forrige måling.

Trin 11: Skub den cervikale krave frem til cervix ved hjælp af tommelfingertappen.


Tommelfingertap

Trin 12: Bestem breddeværdien fra Breddemåleren WIDTH. Sørg for at sikre, at kavitetsbredden er ≥ 2,5 cm. Bed personalet om at indtaste breddeværdien i RF-controlleren.

Trin 13: Tryk på fodkontakten for at starte kavitetsintegritetsvurderingen (CIA).



Trin 14: Træd på fodkontakten for at starte ablationscyklussen, så snart kavitetsintegritetsvurderingen er gennemført, og personalet trykker på ENABLE-knappen på RF-controlleren.

Trin 15: Træk, når ablationen er gennemført (angivet med en konstant lysende grøn INDGREB GENNEMFØRT-LED) den cervikale krave helt tilbage ved at skubbe den til dens proksimale position.

Trin 16: Lås engangsanordningen op ved at trykke på låseudløserknappen. Luk engangsanordningen ved at holde det forreste blå håndtag stationært og træk forsigtigt det bageste håndtag helt bagud.

Trin 17: Fjern engangsanordningen fra patienten.

CE 2797

MISC-07949-NOR-DK Rev. 001©2021 Hologic, Inc. Hologic, NovaSure and The Science of Sure are trademarks or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

European Representative: Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium

NovaSure® Endometrial Ablation