HOLOGIC®
The Science of Sure

PIKAOPAS

NovaSure®-toimenpide

Tämä pikaopas on suunniteltu käytettäväksi yhdessä NovaSure-käyttöoppaan ja ohjaimen käyttöoppaan kanssa, mutta ei korvaamaan niitä. Ennen toimenpiteen suorittamista lääkärin on tarkistettava ja tunnettava ohjaimen ja kertakäyttölaitteen täydelliset käyttöohjeet sekä mahdolliset varoitukset, vasta-aiheet ja turvallisuustiedot.


Vaaditut järjestelmäkomponentit:

A. Yksi steriili, yhden potilaan käyttöön tarkoitettu, NovaSure-kertakäyttölaite
B. NovaSure-radiotaajuusohjain
C. NovaSure-jalkakytkin
D. NovaSure-vaihtovirtajohto
E. Yksi NovaSure ei-steriili imulinjan kuivausainesuodatin
F. Yksi NovaSure CO_2-säiliö



NovaSure RF-ohjaimen (keskusyksikkö) valmistelu:

1. Aseta se pienelle tukevalle pöydälle potilaan toiselle puolelle kirurgin näkökenttään.
2. Kiinnitä vaihtovirtajohto ohjaimeen ja liitä se pistorasiaan.
3. Ruuvaa CO_2-säiliö ohjaimen takapaneelin säätimeen ja kiristä.
4. Paina ohjaimen takapaneelin vaihtokytkin asentoon "ON".
5. Liitä jalkakytkin sopivaan porttiin ohjaimen etupaneelissa.

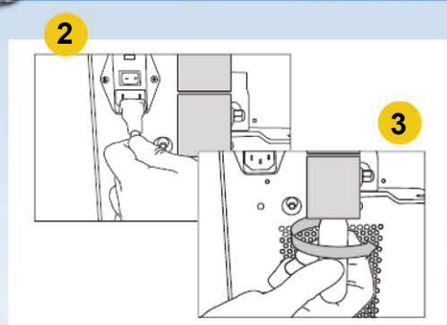



NovaSure®
Endometrial Ablation

NovaSure®-toimenpiteen vaiheet

Henkilökunnalle

Vaihe 1: Kun lääkäri on mitannut kohtuontelon pituuden ja määrittää, että pituus ≥ 4 cm, avaa steriili ja kertakäyttöinen NovaSure-laitepakkaus.

Vaihe 2: Aseta kertakäyttöinen laite, jossa on liitäntäjohto, steriilille alueelle ja pidä epä-steriili imuletkun kuivausainesuodatin poissa steriililtä alueelta.

Vaihe 3: Avaa epä-steriili imulinjan kuivausainesuodatin ja -pussi. Poista punaiset korkit. (Jos kuivausaine on vaaleanpunainen, vaihda hoitokärki uuteen.)

Vaihe 4: Liitä kuivausainesuodattimen putket kertakäyttölaitteen imuletkuun.

Vaihe 5: Liitä kertakäyttöinen laitejohto ohjaimen etuosassa olevaan sopivaan porttiin.


Kuivausainesuodatin

Vaihe 6: Näppäile pituuden arvo lääkärin sanelun mukaan NovaSure RF -ohjaimen pituus-LED:iin painamalla UP/DOWN-nuolia, kosketusnäytöllisessä +/- -näppäimiä.

Vaihe 7: Näppäile WIDTH-valitsimessa ilmoitettu leveys lääkärin sanelun mukaan NovaSure RF -ohjaimen leveys-LED:iin painamalla UP/DOWN-nuolia. Kosketusnäytöllisessä paina vahvistuspainiketta.

Vaihe 8: Kun lääkäri on painanut poljinta ja ontelon eheystesti on suoritettu, paina ohjaimen ENABLE-painiketta. Kosketusnäytöllisessä paina vilkkuvaa painiketta.

Vaihe 9: Kun toimenpide on valmis, lääkäri poistaa hoitokärjen potilaasta. Sammuta NovaSure-keskusyksikkö.

Lääkärille

Vaihe 1: Aseta spekula emättimeen ja tartu kohdunkaulaan pihdeillä.

Vaihe 2: Käyttämällä sondia mittaa kohdunkaula määrittääksesi ontelon pituuden. Varmista, että ontelon pituus on ≥ 4 cm.

Vaihe 3: Kun henkilökunta on liittänyt hoitokärjen ohjausyksikköön, purista hoitokärjen kahvoja kunnes ne lukkiutuvat. Varmistaakseen ohjaimen ARRAY POSITION -asennon LED-merkkivalo sammuu ja WIDTH-valitsimen lukema on ≥ 2,5 cm. Kun se on varmistettu, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä laitteen kahvoja erilleen vetääksesi asettimen pois.


Lukitus Vapautus -painike

Vaihe 4: Säädä ja lukitse kertakäyttöisen laitteen ontelon pituuden säätöominaisuus saatuun ontelon pituusarvoon. Henkilökunta syöttää pituusarvon ohjaimeen.


Ontelon pituusasetus

Vaihe 5: Varmista, että kohdunkaula on laajentunut 6,0 mm:iin.

Vaihe 6: Pitämällä pieni veto pihdeissä, pidä laitteen etukahvasta asettaaksesi laitteen kohdun akselin suuntaisesti, kunnes distaalipää saavuttaa kohdunpohjan.

Vaihe 7: Vedä kertakäyttölaite noin 0,5 cm:n etäisyydelle kohdunpohjasta. Purista kahvoja hitaasti kohonneeseen vastukseen saakka (ÄLÄ LUKITSE). Leveyden valitsimen tulisi olla noin 0,5 cm.

Step 8: Purista laitteen kahvat hitaasti yhteen ja liikuta laitetta varovasti ~ 0,5 cm kohdunpohjaan ja takaisin ja kierrä kertakäyttölaitteen kahvaa 45 ° myötä- ja vastapäivään vertikaalitasosta, kunnes kahvat lukittuvat.

Vaihe 9: Kun laite on lukittu, liikuta laitetta varovasti eteen, taakse ja sivuttain suuntautuvilla liikkeillä. Viimeistele sijoittaminen vetämällä laitetta hieman taaksepäin, kunnes WIDTH-valitsimen lukema pienenee 0,2-0,5 cm.

Vaihe 10: Pitäen pihdeistä kiinni vie kertakäyttölaite hitaasti ja varovasti kohdunpohjaan. Leveyden on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin edellinen mittaus.

Vaihe 11: Liu'uta kohdunkaulan tiiviste kohdunkaulaan käyttämällä peukalokielekettä.


Peukalokieleke

Vaihe 12: Määritä leveysarvo leveysmittarista. Varmista, että ontelon leveys on ≥ 2,5 cm. Pyydä henkilökuntaa syöttämään leveysarvo ohjaimeen.

Vaihe 13: Aloita ontelon eheyden arviointi painamalla jalkapoljinta.



Vaihe 14: Kun ontelon eheyden arviointi on valmis ja henkilökunta painaa ohjaimen ENABLE-painiketta, käynnistä ablaatiosykli painamalla jalkapoljinta.

Vaihe 15: Kun ablaatio on valmis (vihreä PROCEDURE COMPLETE LED-merkkivalo palaa), vedä kohdunkaulan tiiviste kokonaan sisään liu'uttamalla se proksimaaliseen asentoon.

Vaihe 16: Avaa kertakäyttölaitteen lukitus painamalla lukituksen vapautuspainiketta. Sulje kertakäyttölaite pitämällä etukahvaa paikallaan ja vetämällä takakahvaa varovasti taaksepäin.

Vaihe 17: Poista kertakäyttölaite potilaasta.

CE 2797

MISC-07951-NOR-FI Rev. 001 ©2021 Hologic, Inc. Hologic, NovaSure and The Science of Sure are trademarks or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

European Representative: Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium