HOLOGIC®
The Science of Sure

HURTIGGUIDE

NovaSure® - prosedyren

Denne hurtigguiden er utviklet for å brukes sammen med, men ikke erstatte «Bruksanvisning og brukerhåndbok for kontrolleren». Før utføring av prosedyren må legen gjennomgå og være kjent med hele bruksanvisningen for kontrolleren og engangsutstyret, samt eventuelle advarsler, kontraindikasjoner og all sikkerhetsinformasjon.


Nødvendige systemkomponenter

A. Steril NovaSure-engangsenhet
B. NovaSure RF-kontroller
C. NovaSure fotbryter
D. NovaSure strømledning
E. NovaSure ikke-sterilt filter til sugeslangen
F. NovaSure CO_2-beholder



Forberedelse av NovaSure RF-kontrolleren

1. Plasser den på et robust bord på den ene siden av pasienten, innenfor kirurgens synsfelt.
2. Koble strømledningen til kontrolleren og sett den inn i stikkontakten.
3. Skru CO_2-beholderen inn i regulatoren på kontrollerens bakpanel til den er strammet tett.
4. Slå på RF-kontrolleren på kontrollerens bakpanel.
5. Koble fotbryteren til riktig port på kontrollerens frontpanel.

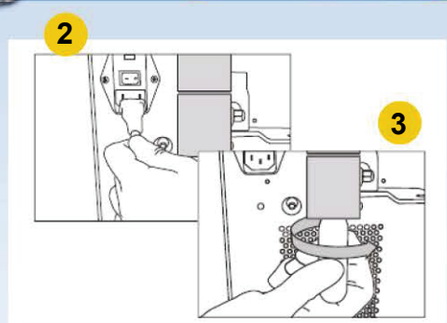



NovaSure®
Endometrial Ablation

Trinn i NovaSure®-prosedyren

For personalet

Trinn 1: Etter at legen har målt kavitetslengden og fastslått lengden er ≥ 4 cm, åpne den sterile emballasjen til at NovaSure-engangsenheten.

Trinn 2: Plasser engangsenheten med tilkoblingsledningen i det sterile feltet mens du holder det ikke-sterile filteret til sugeslangen utenfor det sterile feltet.

Trinn 3: Åpne posen med filteret.
Fjern de røde hettene.
(Hvis filteret er rosa, skift det ut før ablasjonen starter.)

Trinn 4: Koble filteret til sugeslangen.


Filter til sugeslangen

Trinn 5: Koble engangsenhetens ledning til riktig port på kontrollerens fremside.

Trinn 6: Angi lengden legen oppgir i kontrollenhetens lengdefelt ved å bruke OPP/NED-knappene

Trinn 7: Angi bredden legen oppgir i kontrollenhetens breddefelt ved å bruke OPP/NED-knappene.

Trinn 8: Etter at legen har tråkket på fotpedalen og testevalueringen av hulromsintegriteten er fullført, trykk på AKTIVER-knappen på kontrolleren.

Trinn 9: Når prosedyren er fullført og legen fjerner engangsenheten fra pasienten, slå av NovaSure-kontrolleren

For legen

Trinn 1: Sett et spekulum inn i vagina og ta tak i livmorhalsen med et tenaculum.

Trinn 2: Mål sondemålet og cervixlengden for å bestemme kavitetslengden. Forsikre deg om at kavitetslengden er ≥ 4cm.

Trinn 3: Når personalet har koblet engangsenheten til kontrolleren, klem sammen håndtakene på engangsenheten til de låses. ARRAY-POSITIONLED-lyset skal slukkes og BREDDE-hjulet skal vise ≥ 2,5cm.Trykk deretter på låseknappen og før enhetens blå håndtak fra deg for å dra elektrodeviften tilbake i hylsen.


Knapp for frigjøring av låsen

Trinn 4: Juster og lås innstillingen for kavitetslengden på engangsenheten til målt lengde av kavitet. Personaletlegger inn lengdeverdien i kontrolleren.


Innstilling for kavitetsslengde

Trinn 5: Dilater cervix til 6,0mm.

Trinn 6: Behold noe tensjon på tenaculumet og hold i det fremre blå håndtaket for å føre inn enheten i linje med livmorhalsens akse til den distale enden når fundus.

Trinn 7: Trekk engangsenheten tilbake omtrent 0,5cm fra fundus. Klem håndtakene langsomt sammen ved å klemme det blå håndtaket til et punkt med økt motstand (IKKE LÅS). Breddehjulet skal vise omtrent 0,5cm.

Trinn 8: Klem håndtakene sammen ved å klemme det blå håndtaket på enheten langsomt sammen mens du forsiktig flytter enheten ~ 0,5cm til og fra fundus og roterer håndtaket på engangsenheten 45° med og mot klokken fra vertikalt plan til håndtakene låses.

Trinn 9: Når den er låst, beveges enheten forsiktig ved hjelp av fremre, bakre og laterale bevegelser. For å fullføre plasseringen, trekk enheten litt tilbake til BREDDE-avlesningen reduseres med 0,2-0,5cm.

Trinn 10: Hold tenaculumet og før engangsutstyret sakte og forsiktig frem til fundus. Breddemålingen skal være større enn eller lik den foregående målingen.

Trinn 11: Skyv livmorhalskragen til livmorhalsen ved å bruke tommelfliken.


Tommelflik

Trinn 12: Fastslå breddeverdien fra breddemåleren. Forsikre deg om at kavitetsbredden er ≥ 2,5cm. Be personalet om å legge inn bredde-verdien i kontrolleren.

Trinn 13: Trykk på fotpedalen for å starte lekkasjetest av kaviteten.



Trinn 14: Når lekkasjetesten av kaviteten er fullført og personalet trykker på AKTIVER- knappen på kontrolleren, trykk på fotpedalen for å starte ablasjonssyklusen.

Trinn 15: Når ablasjonen er fullført (indikeres av et vedvarende grønt LED for PROSEDYRE FULLFØRT), trekk livmorhalskragen helt tilbake ved å skyve den til sin proksimale posisjon.

Trinn 16: Lås opp engangsenheten ved å trykke på knappen for frigjøring av låsen. Lukk engangsenheten ved å holde det fremre blå håndtaket i stillestående posisjon og trekke det bakre håndtaket lett bakover.

Trinn 17: Fjern engangsenheten fra pasienten.

CE 2797

MISC-07950-NOR-NO Rev. 001 ©2021 Hologic, Inc. Hologic, NovaSure and The Science of Sure are trademarks or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

European Representative: Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium