HOLOGIC®
The Science of Sure

SNABBGUIDE

NovaSure®-proceduren

Denna snabbguide har utformats för att användas tillsammans med, men inte för att ersätta, NovaSures ”Bruksanvisning och användarmanual för kontrollenhet”. Innan proceduren påbörjas måste läkaren läsa igenom och göra sig bekant med den fullständiga bruksanvisningen för kontrollenheten och engångsenheten, inklusive eventuella varningar, kontraindikationer, och säkerhetsinformation.


Nödvändiga systemkomponenter:

A. Sterilt NovaSure handtag för engångsbruk
B. NovaSure RF-kontrollenhet
C. NovaSure-fotpedal
D. NovaSure-strömkabel
E. Ett NovaSure-filter för icke-steril sugledning
F. En NovaSure CO_2-behållare



Förberedelser av NovaSure RF-kontrollenhet:

1. Placera kontrollenheten på ett litet, stabilt bord på ena sidan av patienten och inom läkarens synfält.
2. Anslut strömkabeln till kontrollenheten och anslut till ett eluttag.
3. Skruva i CO_2-behållaren i regulatorn på kontrollenhetens baksida tills den sluter tätt.
4. Slå på apparaten på kontrollenhetens baksida. Anslut
5. fotpedalen till lämplig port på kontrollenhetens framsida.

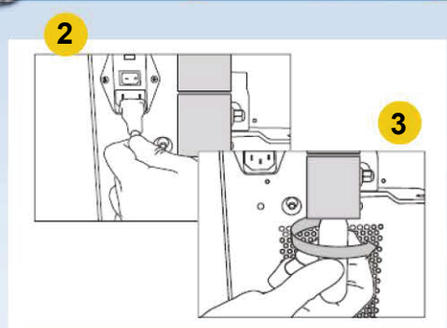



NovaSure®
Endometrial Ablation

Steg som ingår i NovaSure®-proceduren

För personalen

Steg 1: Öppna förpackningen med det sterila NovaSure-handtaget efter att läkaren har mätt kaviteten och konstaterat att längden är ≥ 4 cm.

Steg 2: Placera engångshandtaget med anslutningskabeln på det sterila området, medan påsen med filtret för den icke-sterila sugledningen hålls utanför det sterila området.

Steg 3: Öppna påsen med filtret i. Ta bort de röda locken. (Om filtret är rosa, byt ut det innan ablationen påbörjas.)

Steg 4: Anslut filtret till engångsenhetens sugslang.

Steg 5: Anslut engångsenhetens kabel till lämplig port på kontrollenhetens framsida.



Steg 6: Ange värdet för längd, enligt läkarens uppgifter, på kontrollenheten genom att trycka på piltangenterna UPP/NED.

Steg 7: Ange värdet för bredd, enligt läkarens uppgifter, på kontrollenheten genom att trycka på piltangenterna UPP/NED.

Steg 8: Tryck på knappen AKTIVERA på kontrollenheten efter att läkaren har tryckt på fotpedalen och läckagetestet är godkänt.

Steg 9: Stäng av NovaSure-kontrollenheten när proceduren har avslutats och läkaren har tagit bort engångsenheten från patienten.

För läkaren

Steg 1: För in ett spekulum i vaginan och greppa försiktigt cervix med en Schröder-tång.

Steg 2: Mät sondmåttet och cervixlängd. Subtrahera cervixlängden från sondmåttet för att få kavitetens längd. Säkerställ att kavitetens längd är ≥ 4 cm.

Steg 3: Tryck ihop engångsenhetens handtag tills de låses på plats för att säkerställa att ARRAY POSITION-lampan slocknar och värdet för BREDD visar ≥ 2,5 cm när personalen har ansluti engångsenheten till kontrollenheten. När detta har säkerställts, tryck på upplåsningsknappen och för enhetens blå handtag från dig för att dra tillbaka elektroden i hylsan.



Steg 4: Ställ in kavitetens längd på engångshandtaget enligt den längd som uppmätts. Personalen kommer att mata in längdvärdet på kontrollenheten.



Steg 5: Dilatera cervix till 6,0 mm.

Steg 6: Håll enhetens främre handtag, medan du bibehåller viss spänning ed hjälp av Schröder-tången, för att föra in enheten i linje med livmoderns axel tills den distala änden når fundus.

Steg 7: Dra tillbaka engångshandtaget ca 0,5 cm från fundus. Tryck sakta ihop handtaget tills du känner motstånd (LÅS INTE). Breddangivelsen bör vara ca 0,5 cm.

Steg 8: Tryck sakta ihop enhetens handtag medan du försiktigt flyttar enheten ~0,5 cm till och från fundus och rotera handtaget 45° medurs och moturs tills handtaget är låst.

Steg 9: När handtaget är låst flyttar du försiktigt enheten med hjälp av rörelser framåt, bakåt och åt sidorna. Avsluta positioneringen genom att försiktigt dra tillbaka enheten tills BREDD-angivelsen anger en minskning på 0,2-0,5 cm

Steg 10: För handtaget sakta och försiktigt mot fundus medan du håller Schröder-tången. Breddvärdet ska vara större än eller lika med det tidigare mätvärdet.

Steg 11: För fram den cervikala tätningen mot cervix med hjälp av tumfliken.



Steg 12: Fastställ kavitetens bredd med hjälp av breddmätaren. Säkerställ att kavitetens bredd är ≥ 2,5 cm. Be personalen att mata in breddvärdet på kontrollenheten.

Steg 13: Tryck på fotpedalen för att starta läckagetestet (CIA).

Steg 14: Tryck på fotpedalen för att inleda ablationscykeln när läckagetestet är avslutat och personalen har tryckt på AKTIVERA-knappen på kontrollenheten.



Steg 15: När ablationen är avslutad (anges av att PROCEDURE COMPLETE--lampan lyser grön/det står Procedur slutförd på skärmen) ska den cervikala tätningen dras tillbaka helt till sin proximala position.

Steg 16: Lås upp engångshandtaget genom att trycka på upplåsningsknappen. Stäng engångsenheten genom att hålla det främre handtaget stilla och försiktigt dra det bakre handtaget bakåt.

Steg 17: Avlägsna Novasure-handtaget från patienten.

CE 2797

MISC-07947-NOR-SE Rev. 001 ©2021 Hologic, Inc. Hologic, NovaSure and The Science of Sure are trademarks or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

European Representative: Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium