Snabbguide

Aquilex™ Fluid Control System

1 SÄTT I OCH ANSLUT KANISTRAR (Se kanisterkonfigurering)

Anslut färgkodad återanvändbar vakuumslang från höga/låga vakuumportar till vakuumportar på de bakre kanistrarna..

- Tandemkoppla kanistrarna på framsidan med de bakre kanistrarna. Placera vävnadsfällan i främre högvakuumkanister.
- Anslut utflödes slang (Y-format):
  - Gul koppling till drapering
  - Vit koppling till främre lågvakuumkanister
  - Gult luerlock till hysteroskopets utflödeskanal

2 STARTA/SÄTT PÅ AQUILEX™-SYSTEMET

Systemet kommer utföra ett självdiagnostiskt test.



3 SÄTT I INFLÖDESSLANGAR

- Placera slangar i pumphuvudet.
- Anslut blå luerlock till hysteroskopets inflödeskanal.

4 HÄNG UPP OCH ”SPIKA” DIN DROPPÅSE

- Öppna hysteroskopets inflödeskran.
- Tryck på knappen ”Prime”. ”Prime”-läget kommer rensa bort luft från slangen och utföra en automatisk lumenkalibrering.
- Stäng inflödeskranen när ”Prime” är klart (1 pip).
- Testa vakuumnivån genom att sätta ett finger på vävnadsfällans öppning och patientport för att säkra att kanistrarna är förseglade.





5 STÄLL IN INTRAUTERINT TRYCK



6 STÄLL IN DEFICIT LIMIT (VÄTSKEFÖRLUST)



7 TRYCK ”ZERO” FÖR ATT NOLLSTÄLLA VÄTSKEFÖRLUSTEN



Denna snabbguide är utformad för att användas tillsammans med, men ersätter inte, Aquilex bruksanvisning. Innan utförandet av proceduren måste läkaren granska och bekanta sig med de kompletta instruktionerna för drift av enheten, samt all varnings-, kontraindikations- och säkerhetsinformation.

Hologics tekniska support
0800 032 3318.

HOLOGIC®

Byta kanister

1. Tryck på knappen "**Pause/Resume**".
   "**Pump Paused for Container Change**" kommer synas.
   Kirurgen måste pausa proceduren tills kanisterbytet är klart.
2. Tryck på knappen "**Pause/Resume**" när du är redo att återuppta proceduren. Systemet behöver inte pausas för byte av droppåse.

Hantering av det intrauterina trycket och visualisering

Följande tips kommer hjälpa dig optimera trycket i livmodern och/eller visualisering.

Vätskekontrollsystem

1. Verifiera att klämman på koksaltpåsen är öppen.
2. Verifiera att kanisterlocken är förslutna.
3. Öka vätskepumpstrycket.*

Hysteroskop

1. Se till att inflödesslangen är kopplad till inflödesporten.
2. Se till att inflödesslangen inte är blockerad eller punkterad.
3. Sänk sug-/vakuumnivån

MyoSure®-handtag

1. Avlägsna Myosure handtaget med skärfönstret synligt och tryck ner fotpedalen under 1-2 sekunder för att rensa fältet.

Hantering av höga eller snabbt ökande vätskeförluster

Om vätska samlas på operationsduken, kontrollera att dukens port är öppen. (På en del dukar måste man klippa av porttoppen).


*För ytterligare vägledning se: Vägledning för hysteroskopisk vätskeövervakning, AAGL AdHoc Committee; F. Loffer M.D., L. Bradley M.D., A. Brill M.D., P. Brooks M.D., och J. Cooper M.D. februari 2000, Vol. 7. Nr. 1, The Journal of the American Association of Gynecological Laparoscopists



Hologics tekniska support **0800 032 3318.**

PB-00149-NOR-SE Rev. 001 Hologic, Aquilex och MyoSure är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.

Aquilex™ kanisterkonfigurering (Serres® märkeskanistrar)

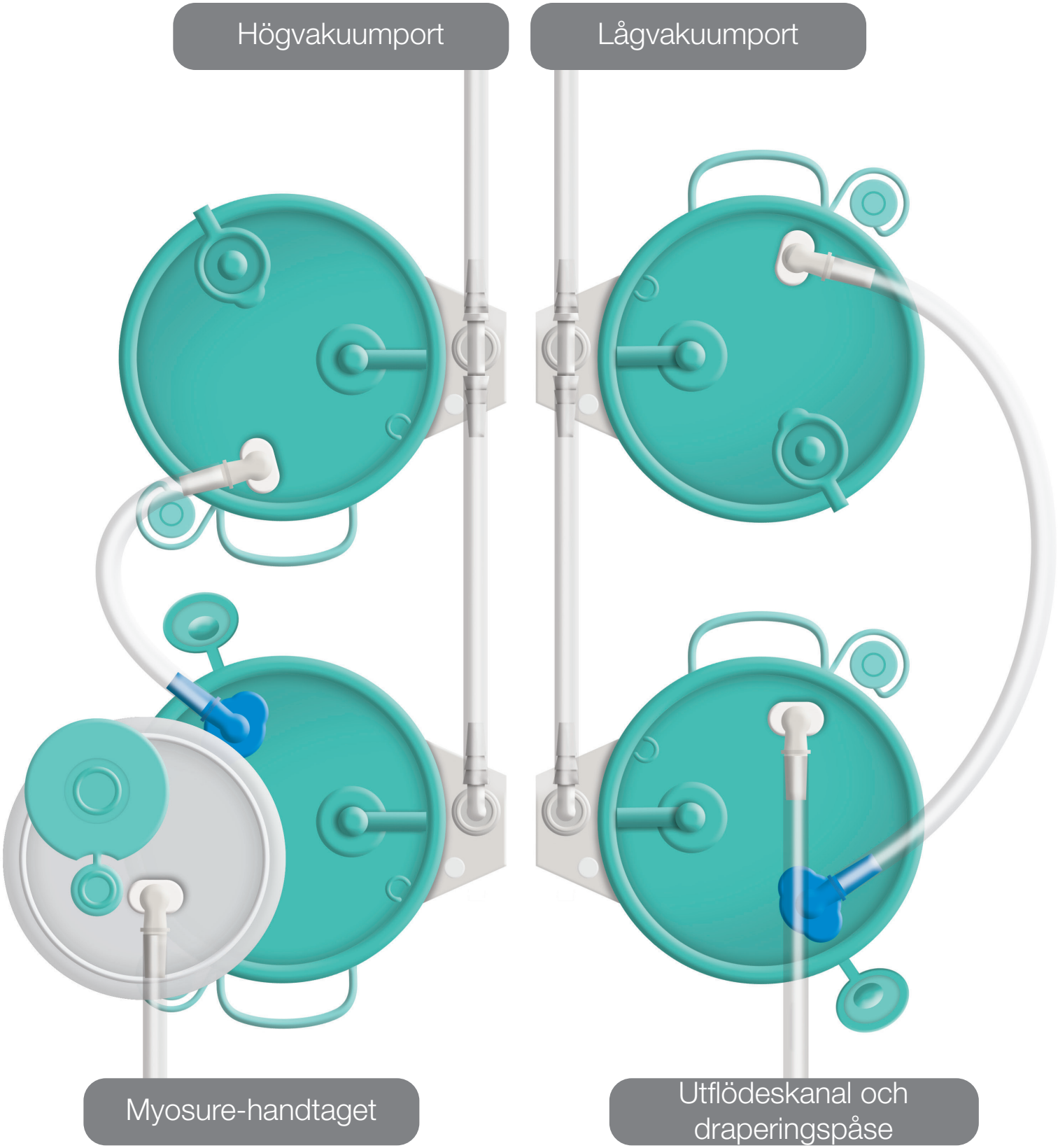

Hologics tekniska support **0800 032 3318.**

PB-00149-NOR-SE Rev. 001 Hologic, Aquilex och MyoSure är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken, registrerade varumärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.