Hurtigoppsettguide

Aquilex™ Fluid Control System

1 MONTERING OG TILKOBLING AV BEHOLDERE (se konfigurasjon av beholdere)

Koble til de fargekodede flergangs vakuumslangene fra høy-/lavvakuumporter til vakuumporten på baksiden av beholderne.

- Seriekoble frontbeholdere til bakbeholdere ved hjelp av tandemportene. Plasser vevs oppsamleren på den fremre beholderen med høyt vakuum.
- Koble til Y-slanger for outflow:
  - Gul tilkobling til draperingsposen
  - Hvit tilkobling til fremre beholder med lavt vakuum
  - Gul luer-lås til outflowkanalen på hysteroskopet

2 SLÅ PÅ AQUILEX™-SYSTEMET

Systemet utfører en selvdiagnosetest.



3 MONTER INFLOWSLANGE

- Monter slangen i hjulet på pumpen.
- Koble den blå luerlås-koblingen til hysteroskopets in-flow port.

4 HENG OPP OG SPIKE VÆSKEPOSE(R)

- Åpne hysteroskopets stoppventil til in-flow.
- Trykk på «Prime»-knappen. «Prime»-modus fjerner luft fra slangen og utfører automatisk lumenkalibrering.
- Når «Prime» er fullført (1 pip), lukk stoppventilen til in-flow på hysteroskopet.
- Test vakuumnivået ved å plassere fingeren over åpningen til vevsoppsamleren og pasientporten for å forsikre at beholderne er forseglet.





5 STILL INN INTRAUTERINT TRYKK



6 STILL INN DEFICIT NIVÅ



7 TRYKK PÅ «NULL» FOR Å STILLE INN DEFICIT NIVÅ TIL "0"



Denne hurtigkonfigurasjonsveiledningen er laget for å brukes sammen med, men ikke erstatte, bruksanvisningen for Aquilex. Før prosedyren gjennomføres, må legen gå gjennom og bli kjent med alle instruksjonene for betjening av enheten, i tillegg til alle advarsler, kontraindikasjoner og sikkerhetsinformasjon.

For teknisk brukerstøtte fra Hologic, ring **0800 032 3318.**

HOLOGIC®

Bytte av beholdere

1. Trykk på knappen «**Pause/Resume**».
   «**Pump Paused for Container Changer**» vises.

   Kirurgen må sette prosedyren på pause til bytte av beholder er fullført.

2. Trykk på knappen «**Pause/Resume**» når du er klar til å gjenoppta prosedyren. Systemet trenger ikke å settes på pause ved bytte av vannposer.

Håndtering av distansering og visualisering

Følgende tips hjelper deg med å optimalisere livmorutvidning og/eller visualisering.

Kontrollsystem for væske

1. Bekreft at saltvannsposen er åpen.
2. Bekreft at alle lokkene på beholderne er forseglet.
3. Øk trykket i væskepumpen.*

Hysteroskop

1. Sikre at innløpsslangen er koblet til inflow-porten.
2. Kontroller at in-flowslangen ikke er tett eller klemt.
3. Senk suge-/vakuumnivået.

MyoSure® vevsfjerningsenhet

1. Trekk MyoSure-instumentets kuttevindu helt inn i hysteroskopet med forkanten av utskjæringsvinduet og trykk ned fotpedalen i 1 til 2 sekunder for å tømme synsfeltet.

Håndtere høye eller raskt økende væskedeficit

Hvis det samler seg væske i draperingsposen, sjekk for å sikre at porten til posen er åpen. (Noen draperingsposer krever at spissen på tilkoblingsporten skjæres av).


* For å finne ytterligere veiledning, se: Hysteroscopic Fluid Monitoring Guidelines, AAGL AdHoc Committee; F. Loffer M.D., L. Bradley M.D., A. Brill M.D., P. Brooks M.D., and J. Cooper M.D. February 2000, Vol. 7. No. 1, The Journal of the American Association of Gynecological Laparoscopists



For teknisk brukerstøtte fra Hologic, ring **0800 032 3318.**

PB-00149-NOR-NO Rev. 001 Hologic, Aquilex og MyoSure er varemerker og/eller registrert varemerke som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker, registrerte varemerker og produktnavn tilhører de respektive eierne.

Aquilex™ konfigurasjon av beholder (Serres® merkebeholdere)

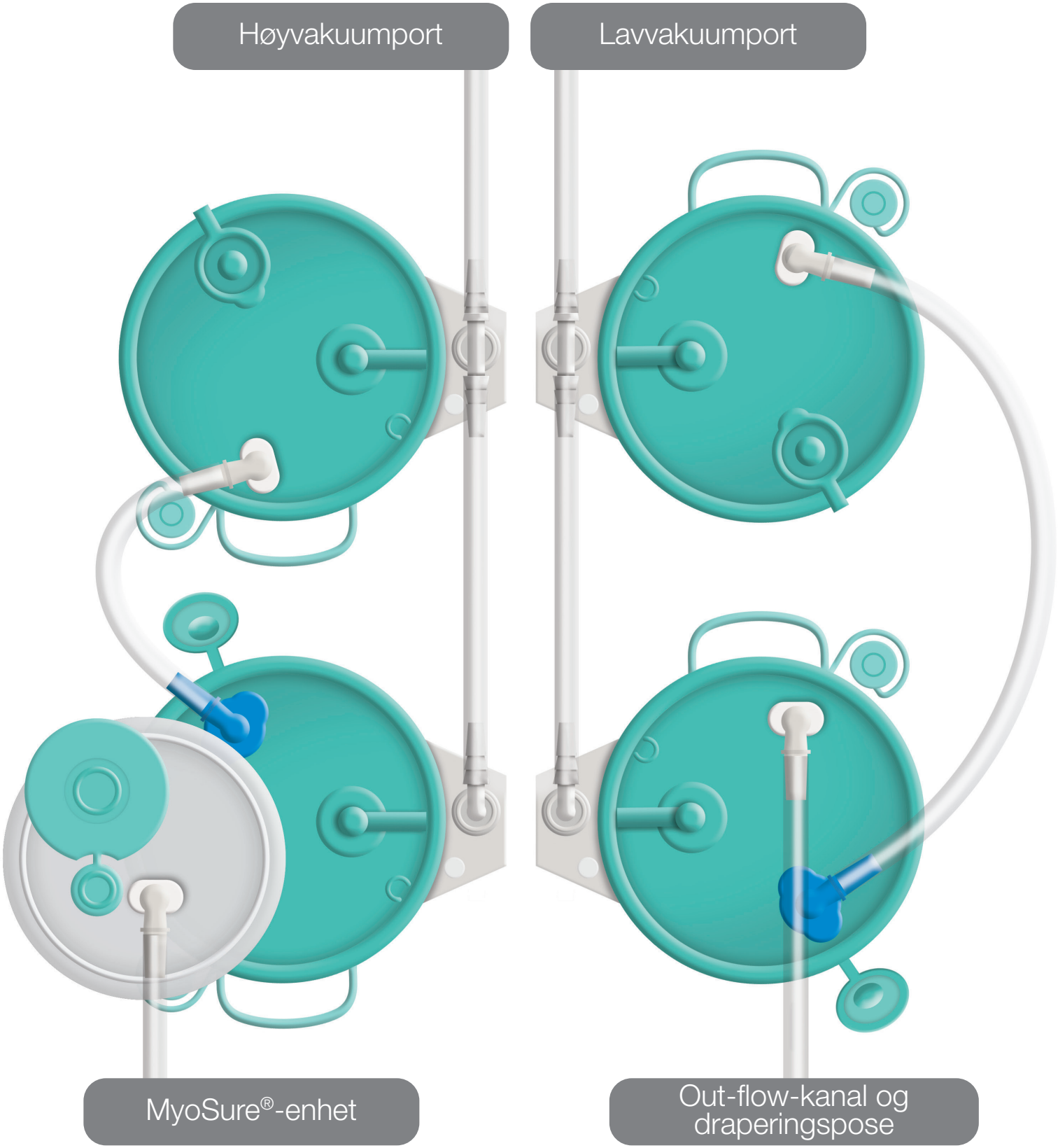

For teknisk brukerstøtte fra Hologic, ring **0800 032 3318.**

PB-00149-NOR-NO Rev. 001 Hologic, Aquilex og MyoSure er varemerker og/eller registrert varemerke som tilhører Hologic, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker, registrerte varemerker og produktnavn tilhører de respektive eierne.