Vejledning til hurtig opsætning

Aquilex™ Fluid Control System

1 INDSÆT OG TILSLUT BEHOLDERNE (se konfiguration af beholdere)

Tilslut de farvekodede genanvendelige vakuumslanger fra portene med højt/lavt vakuum til vakuumportene på de bagerste beholdere.

- Tilslut de forreste beholdere i tandem til de bagerste beholdere ved hjælp tandemportene. Anbring vævsfælden i den forreste beholder med højt vakuum.
- Tilslut udløbs-Y-slangen:
  - Gult stik til drapering
  - Hvidt stik til den forreste beholder med lavt vakuum
  - Gul luer-lock til skop-udløbskanal

2 TÆND FOR AQUILEX™-SYSTEMET

Systemet vil udføre en selvdiagnosetest.



3 INDSÆT INDLØBSSLANGE

- Anbring slangen i pumpehovedet.
- Tilslut den blå luer-lock-fitting til hysteroskopets indløbsport.

4 HÆNG OG SPID VÆSKEPOSE(R)

- Åbn hysteroskopets indløbsstophane.
- Tryk på "Prime"-knappen. "Prime"-tilstand renser luft ud fra slangen og gennemfører automatisk lumen-kalibrering.
- Når "Prime" er gennemført (1 bip), så luk indløbsstophanen.
- Test vakuumniveauet ved at placere en finger over vævsfælde-åbningen og patientporten for at sikre, at beholderne er forseglede.





5 INDSTIL DET INTRAUTERINE TRYK



6 FASTSÆT EN UNDERSKUDSGRÆNSE



7 TRYK PÅ "ZERO" FOR AT SÆTTE UNDERSKUDDET TIL "0"



Denne vejledning til hurtig opsætning er beregnet til anvendelse sammen med, men erstatter ikke, Aquilex-brugervejledningen. Før proceduren udføres, skal lægen gennemgå og gøre sig bekendt med den fulde brugervejledning vedrørende anvendelse af apparatet samt eventuelle advarsler, kontraindikationer og sikkerhedsoplysninger.

For Hologic teknisk support, ring venligst til **0800 032 3318.**

HOLOGIC®

Udskiftning af beholdere

1. Tryk på knappen "**Pause/Resume**" (pausér/fortsæt).

   "**Pump Paused for Container Change**" (pumpe pauseret for udskiftning af beholder) bliver vist.

   Kirurgen skal pausere proceduren, indtil udskiftningen af beholdere er afsluttet.

2. Tryk på knappen "**Pause/Resume**", når du er klar til at fortsætte proceduren. Det er ikke nødvendigt at pausere systemet for at skifte poserne.

Håndtering af udspiling og visualisering

Følgende tips vil hjælpe dig med at optimere uterusudspiling og/eller visualisering.

System til væskekontrol

1. Verificer, at klemmen på saltvandsposen er åben.
2. Verificer, at alle beholderlåg er forseglet.
3. Forøg trykket i væskepumpen.*

Hysteroskop

1. Sørg for, at indløbsslangen er tilsluttet indløbsporten.
2. Sørg for, at indløbsslangen ikke er tilstoppet eller klemt.
3. Sænk niveauet for sugning/vakuum.

MyoSure®-vævsfjernelsesenhed

1. Træk MyoSure-vævsfjernelsesenheden tilbage med den forreste kant af skærevinduet synlig, og tryk fodpedalen ned i 1 til 2 sekunder for at rydde feltet.

Håndtering af høje eller hurtigt stigende væskeunderskud

Hvis væsken samler sig i draperingen under balderne, skal du sørge for at sikre dig, at draperingsporten er åben. (Nogle draperinger kræver, afskæring af portspidsen til tilslutning).




*For yderligere vejledning henvises til: Hysteroscopic Fluid Monitoring Guidelines, AAGL AdHoc Committee; F. Loffer M.D., L. Bradley M.D., A. Brill M.D., P. Brooks M.D., and J. Cooper M.D. February 2000, Vol. 7. No. 1, The Journal of the American Association of Gynecological Laparoscopists

For Hologic teknisk support, ring venligst til **0800 032 3318.**

PB-00149-NOR-DK Rev. 001 Hologic, Aquilex og MyoSure er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller virksomhedens datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, registrerede varemærker og produktnavne tilhører deres respektive ejere.

Aquilex™ konfiguration af beholdere (beholdere af mærket Serres®)

Aquilex™ Fluid Control System

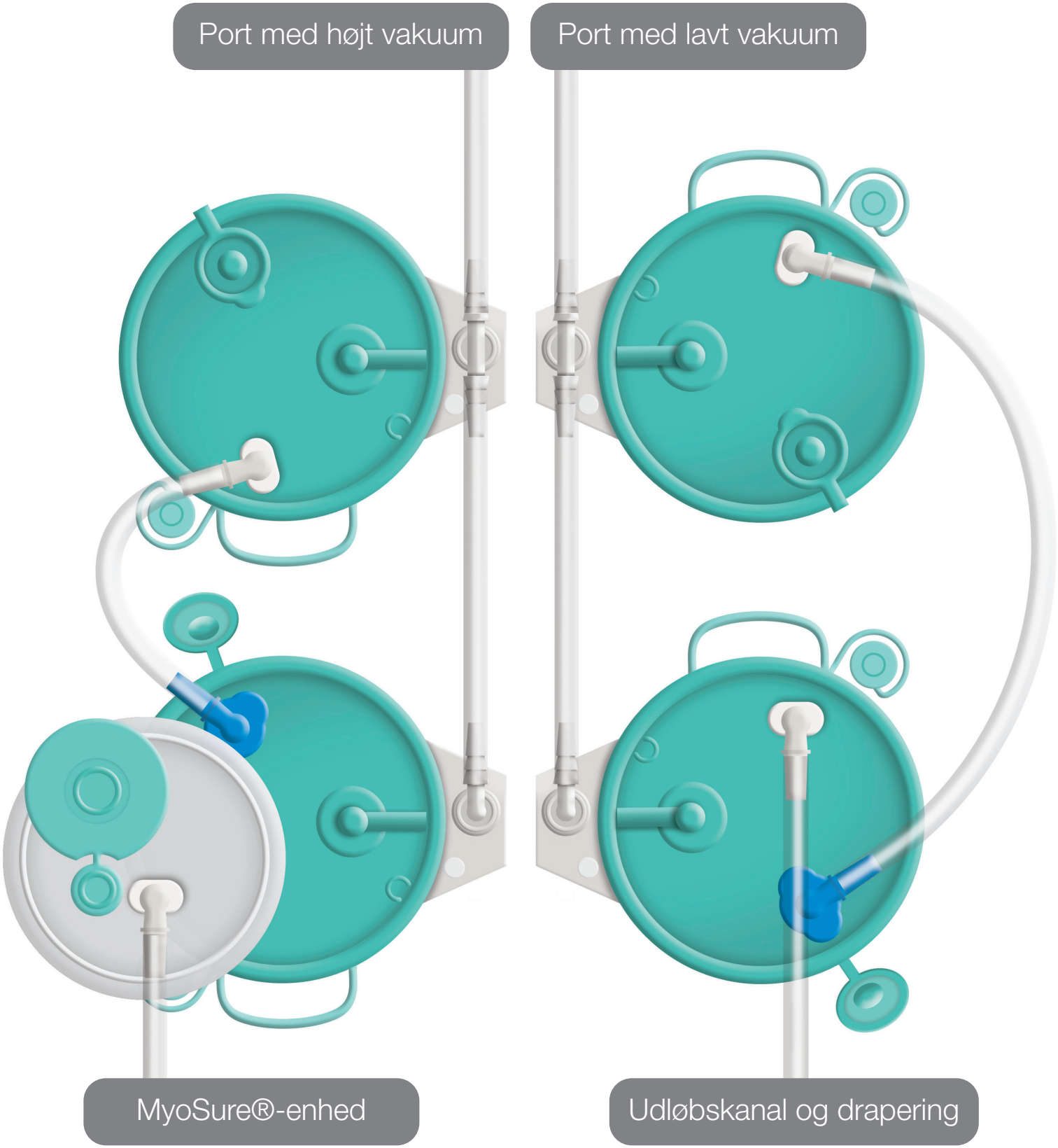

For Hologic teknisk support, ring venligst til **0800 032 3318.**

PB-00149-NOR-DK Rev. 001 Hologic, Aquilex og MyoSure er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører Hologic, Inc. og/eller virksomhedens datterselskaber i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker, registrerede varemærker og produktnavne tilhører deres respektive ejere.

HOLOGIC®